


F-1408 ハイグレードPFAボトル

High-grade PFA bottle

PTFE®

原料から製造工程まで 高品質にこだわりました

- 最高品質のPFAレジンを使用。独自のストレッチブロー成型技術が極めて滑らかな内面を実現し、注出口の変形および二次加工による微量金属の付着がありません。
- 極めて滑らかな内面加工
独自開発のストレッチブロー成型で、極めて滑らかな内面を実現。目に見えない凹凸による極微量の薬液残留をも防止します。容器側壁の厚さも均一化されています。
- 注出口の内側を垂直に成型
注出口の内側にくびれが一切ないため、薬液が残らずロスがありません。塩酸などの危険薬液でも、ムラのない滑らかな注出が可能のため安全です。
- 高い気密性、内蓋不要
あらかじめ注出口の捻子部分を成型してから容器を成型するため、捻子の変形を抑制。内蓋を使わずに高い気密性を確保しました。内蓋がないため汚染リスクも低下します。
- ハイグレードPFAレジン使用
高純度バージンPFAレジンを使用しています。高純度薬品販売用パッケージに最適です。
- クリーンルーム内で製造
クリーンルーム内で成型。工程全体を高純度化することで、不純物の混入を極力回避します。

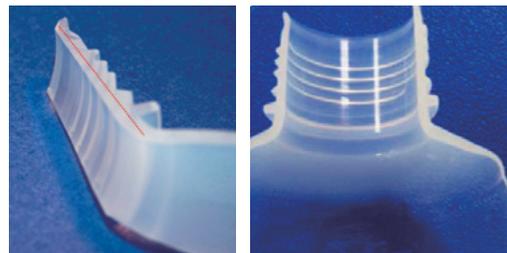

※ クリーンバックではありません。

F-1408 コードNo.	容量 mℓ	高さ (A) %	蓋外径 (B) %	本体外径 (C) %	本体口内径 %	蓋	重量 g
-001	50	84	37	37	25	33% ねじ蓋	35
-002	100	109	54	56	37	GL45 ねじ蓋	127
-003	250	146	54	70	37	GL45 ねじ蓋	168
-004	500	160	54	85	37	GL45 ねじ蓋	209
-005	1,000	218	54	101	37	GL45 ねじ蓋	313
-006	2,000	248	54	127	37	GL45 ねじ蓋	458



F-1408 コードNo.	蓋形状	ポート/サイズ
-012	標準蓋	なし
-013	移送用蓋	外径 1/8" φチューブ接続用 (上1個、横1個)
-014	移送用蓋	外径 1/4" φチューブ接続用 (上1個、横1個)
-015	排気ポート付移送用蓋	排気ポート(上)、外径 1/4" 接続用(横)
-016	PTFEメンブレンφ9	φ9 孔径1~2μm/10枚入り