

■ PFA & CTFEクロマトカラムは、耐薬品性、耐圧性、耐候性、耐熱性に優れた、液体クロマトカラムです。



## F-6048 PFA & CTFE TK型クロマトカラム

PFA & CTFE chromatographic column TK type

PFA CTFE®

■ PFA & CTFEクロマトカラム TK型(基本型)は、弊社独自の製品です。

- カラム管には、透明なPFAを使い、上下の接続部はフレア式になっており、カラム栓は、CTFEを使用しています。
- 分解、洗浄、組立が簡単におこなえます。
- 組立方法は、下部のカラム栓の先端にPTFEフィルターをかぶせてカラム管のフレア部に差込み、上下の締付ナットで固定してください。

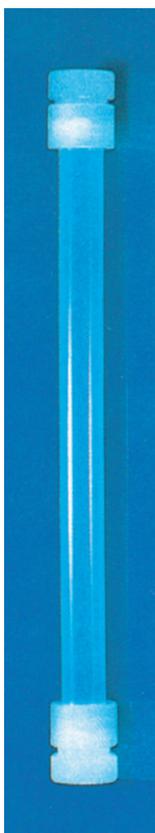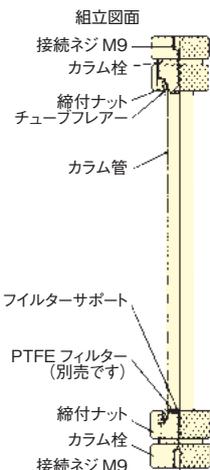

F-6048 コードNo.	製品番号	内径 %φ	長さ %φ	容量約 mL	常用圧力 MPa
-001	TK-820	8φ	200	9	0.3
-002	TK-830	8φ	300	15	0.3
-003	TK-1020	10φ	200	14	0.3
-004	TK-1030	10φ	300	21	0.3
-005	TK-1320	13φ	200	23	0.3
-006	TK-1330	13φ	300	37	0.3
-007	TK-1630	16φ	300	55	0.3
-008	TK-1650	16φ	500	95	0.3
-009	TK-2030	20φ	300	87	0.3
-010	TK-2050	20φ	500	150	0.3
-011	TK-2630	26φ	300	140	0.3
-012	TK-2650	26φ	500	250	0.3

※ カラム管の長さは表以外に1mまで製作できます。

## F-6049 PFA & CTFE TKS型クロマトカラム

PFA & CTFE chromatographic column TKS type

PFA CTFE®

■ クロマトカラムTKS型は、TK型(基本型)に上下にコネクタと袋ナットを取り付けPTFEチューブ2.0φ×1.0φフレア接続して使用します。

- PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。



F-6049 コードNo.	製品番号	内径 %φ	長さ %φ
-001	TKS-820	8φ	200
-002	TKS-830	8φ	300
-003	TKS-1020	10φ	200
-004	TKS-1030	10φ	300
-005	TKS-1320	13φ	200
-006	TKS-1330	13φ	300
-007	TKS-1630	16φ	300
-008	TKS-1650	16φ	500
-009	TKS-2030	20φ	300
-010	TKS-2050	20φ	500
-011	TKS-2630	26φ	300
-012	TKS-2650	26φ	500


※ 表中の基本PTFEチューブは2.0φ×1.0φを使用します。

## F-6050 PFA & CTFE TKB型クロマトカラム

PFA & CTFE chromatographic column TKB type

PFA CTFE®

- 下記の表は、右図面通りの部品がセットになります。

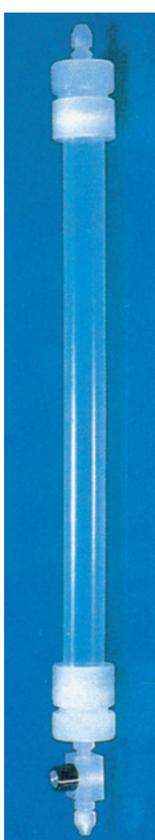

F-6050 コードNo.	製品番号	内径 %φ	長さ %φ
-001	TKB-820	8φ	200
-002	TKB-830	8φ	300
-003	TKB-1020	10φ	200
-004	TKB-1030	10φ	300
-005	TKB-1320	13φ	200
-006	TKB-1330	13φ	300
-007	TKB-1630	16φ	300
-008	TKB-1650	16φ	500
-009	TKB-2030	20φ	300
-010	TKB-2050	20φ	500
-011	TKB-2630	26φ	300
-012	TKB-2650	26φ	500


※ 表中の基本PTFEチューブは2.0φ×1.0φを使用します。

## F-6051 PFA & CTFE TKB-2型クロマトカラム

PFA & CTFE chromatographic column TKB-2 type

PFA CTFE®

- 下記の表は、右図面通りの各部品がセットになります。

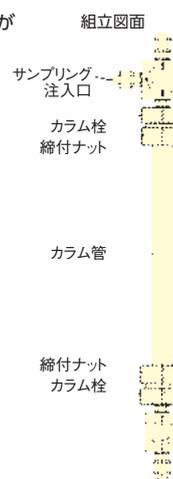

F-6051 コードNo.	製品番号	内径 %φ	長さ %φ
-001	TKB2-820	8φ	200
-002	TKB2-830	8φ	300
-003	TKB2-1020	10φ	200
-004	TKB2-1030	10φ	300
-005	TKB2-1320	13φ	200
-006	TKB2-1330	13φ	300
-007	TKB2-1630	16φ	300
-008	TKB2-1650	16φ	500
-009	TKB2-2030	20φ	300
-010	TKB2-2050	20φ	500
-011	TKB2-2630	26φ	300
-012	TKB2-2650	26φ	500

※ 表中の基本PTFEチューブは2.0φ×1.0φを使用します。